



เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ:
วัดค่ามวลร่างกาย

รุ่น FG2431WB



SMART WEIGHT SCALE : FG2431WB

FRONT

การแจ้งเตือนแบตเตอรี่และข้อผิดพลาด

	แบตเตอรี่ต่ำ (กรุณาชาร์จแบตเตอรี่)
	น้ำหนักมากเกินไป (เครื่องชั่งน้ำหนักจะแสดงสัญลักษณ์นี้ เมื่อชั่งน้ำหนักมากเกินไปเครื่องจะรับได้)
	เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการชั่ง
	แบตเตอรี่ต่ำ (กรุณาชาร์จแบตเตอรี่)

คำแนะนำการแก้ไขปัญหา

1. บลูทูธไม่ถูกเชื่อมต่อ

- กิ่งเครื่องชั่งน้ำหนักและสมาร์ตโฟนจะต้องเปิดบลูทูธอยู่
- ตรวจสอบเวอร์ชัน IOS ของสมาร์ตโฟนของคุณ จำเป็นต้อง IOS 8.0 ขึ้นไป/Android 6.0 ขึ้นไป
- คลิก Account → Device → + → Searching Bluetooth สำหรับการจับคู่เพื่อค้นหาเครื่องชั่งน้ำหนัก

(รักษาสถานะเครื่องชั่งน้ำหนักให้คงอยู่) จากนั้นโทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเครื่องชั่งน้ำหนักแล้ว

2. ไม่มีข้อมูลบันทึกในร่างกาย ในขณะที่ชั่งน้ำหนักอยู่

- ผู้ใช้งานต้องไม่สวมรองเท้าหรือถุงเท้าระหว่างการวัดไขมันในร่างกาย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเท้าของคุณและเครื่องชั่งน้ำหนักอยู่ในสถานะแห้งทั้งคู่ เครื่องชั่งน้ำหนักไม่เสร็จสิ้น จนกระทั่งจอแสดงตัวเลขหายไป

(สถานะเครื่องชั่งน้ำหนักไปประมาณ 30 วินาที จนกว่าตัวเลขบนจอจะหยุดกะพริบ)

- บลูทูธไม่ได้เปิดอยู่
- บลูทูธเชื่อมต่อกับเครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องอื่น

3. เครื่องชั่งน้ำหนักแสดงน้ำหนักที่ผิดพลาด

- ตรวจสอบว่าเครื่องชั่งน้ำหนักอยู่บนพื้นผิวที่แข็งและเรียบ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานเซ็นเซอร์แต่ละอันที่ด้านล่าง ไม่มีอะไรติดอยู่ที่ด้านล่าง
- นำแบตเตอรี่ออกและรีเซ็ตเครื่องชั่งน้ำหนักใหม่อีกครั้ง

4. แอปพลิเคชันแสดงอัตราส่วนไขมันต่อกล้ามเนื้อที่ไม่ถูกต้อง

- การตั้งค่าการวัดไขมันในร่างกายไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีน้ำหนักส่วนสูง และอายุที่ถูกต้อง

5. ประสิทธิภาพเครื่องชั่งน้ำหนักหลังจากการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างไร

- ก้าวขึ้นไปบนเครื่องชั่งน้ำหนักเพื่อเปิดเครื่อง ปล่อยให้เครื่องชั่งน้ำหนักลดลงอัตโนมัติเป็น 0.0 lb เพื่อปรับเทียบ

6. เครื่องชั่งน้ำหนักไม่สามารถเปิดใช้งานได้

- ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วใส่กลับเข้าไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

7. เครื่องชั่งน้ำหนักแสดงน้ำหนักและ BMI?

- สำหรับการใช้งานครั้งแรกของอุปกรณ์ทุกชิ้น จำเป็นต้องใช้แท็บเล็ตออนไลน์ เชื่อมต่อกับแอปเพื่อความสำเร็จในการวิเคราะห์
- มิฉะนั้น เครื่องชั่งจะชั่งน้ำหนักและ BMI เท่านั้น
- ยืนยันให้แยกจากกัน และยืนยันเครื่องชั่งน้ำหนักโดยขึ้นน้ำหนักทางหน้าจอแสดงผล มิฉะนั้น เครื่องชั่งจะชั่งน้ำหนักและ BMI เท่านั้น
- ยืนยัน 1-2 ครั้งประมาณ 20-30 วินาทีเพื่อให้การชั่งเสร็จทั้งหมด มิฉะนั้น เครื่องชั่งจะชั่งน้ำหนักและ BMI เท่านั้น

กรุณาอ่านคำแนะนำของคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
ก็ทำให้ไว้ในคู่มือหรือการใช้เครื่องชั่งนี้ในลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือนี้อาจส่งผลให้ได้รับ
บาดเจ็บหรือทำให้เครื่องชั่งน้ำหนักเสียหายได้

หมายเหตุ

ข้อมูลทั้งหมดที่วัดค่าโดยเครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมันในร่างกายจะอิงระยะใช้เพื่ออ้างอิงโดยเฉพาะและไม่ควรใช้เพื่อวิเคราะห์ทางการแพทย์

ข้อมูลที่วัดค่าได้อาจไม่แม่นยำหาก

- คุณยังเป็นผู้เยาว์
- คุณกำลังตั้งครรภ์

**** ห้ามใช้เครื่องมือนี้หากคุณสามารถฟังเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ไว้**

คำเตือน

- ห้ามถอดประกอบ บีบ เจาะ หรือทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- ห้ามวางเครื่องชั่งน้ำหนักลงในน้ำหรือไฟ
- ห้ามใช้งานเครื่องชั่งในอุณหภูมิที่มากกว่า 60°C (140°F)
- อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่และควรวางให้ห่างจากแหล่งความร้อน (เครื่องทำความร้อน เตา เตาผิง ฯลฯ)
- อุปกรณ์นี้ไม่กันน้ำ ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้ในพื้นที่ที่มีฝนตกหรือทำความสะอาดพ่นน้ำโดยตรง
- ห้ามถอดประกอบหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตนเอง การกระทำที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการระเบิดของแบตเตอรี่ได้
- ระหว่างการซ่อมแซม
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่อ่อนแอ ตอบสนองช้า หรือมีอาการผิดปกติทางจิต
- เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำจากผู้ที่ได้รับประสบการณ์ความปลอดภัย
- เก็บอุปกรณ์ให้พ้นมือเด็ก ดูแลเด็กไม่ให้เล่นอุปกรณ์นี้

วิธีการดูแลรักษา

- ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาด
- ห้ามใช้ผงซักฟอกใด ๆ ในการทำความสะอาด

หมายเหตุ

- เมื่อวางบนพื้นแข็งและเรียบ หน้าจอจะเปิดขึ้นเมื่อตรวจจบน้ำหนักได้มากกว่า 5 กก.
- หากอุปกรณ์มีแบตเตอรี่ AAA 3 ก้อน กรุณาใส่แบตเตอรี่ตามของขั้วบวกและขั้วลบให้ถูกต้อง
- หากเครื่องชั่งมีแบตเตอรี่ AAA 3 ก้อนในตู้จากโรงงาน กรุณาถอดแบตเตอรี่ออก



ข้อมูลจำเพาะ:

หน่วยน้ำหนัก	: กก./ปอนด์/ตัน (เปลี่ยนหน่วยได้ผ่านการตั้งค่าแอปพลิเคชัน หรือปุ่มด้านใต้ของเครื่องชั่ง)
จำกัดน้ำหนัก	: 5-180 กก./11lb-396 ปอนด์
แหล่งจ่ายไฟ	: แบตเตอรี่ AAA 3 ก้อน
หมายเลขบัญชี	: แต่ละบัญชีสามารถเพิ่มได้ 24 คน
อุณหภูมิในการทำงาน	: 10-40°C
ความชื้นในการทำงาน	: 20%-90%
อุปกรณ์ที่รองรับ	: IOS 8.0 ขึ้นไป Android 6.0 ขึ้นไป

วิธีการติดตั้งแอป Starfit


1. ค้นหา "Starfit" ใน App Store หรือ Google Play หรือสแกน QR Code
2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปบนอุปกรณ์ของคุณ
3. ใส่ออนแอปจะปรากฏบนโทรศัพท์ หรือเก็บสิทธิ์ของคุณหลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น




หมายเหตุ:

1. สำหรับการใช้งานครั้งแรก อุปกรณ์จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมด นอกเหนือจากน้ำหนักและ BMI
 - ระหว่างการใช้งาน กรุณาเปิดแอปพลิเคชันไว้ที่หน้า Homepage และยืนอยู่ในตำแหน่งเดิมเป็นเวลา 3 วินาที
 - หลังจากการชั่งน้ำหนักเสร็จสิ้น คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลหลักทั้ง 6 ได้ที่หน้าจอ LED
 - คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน
2. สำหรับการใช้งานครั้งที่ 2 การวัดค่าต่าง ๆ แบบออนไลน์ สามารถทำได้ (ไม่จำเป็นต้องเปิดแอปพลิเคชันสำหรับการชั่งน้ำหนักทุกครั้ง)

12. เพิ่มหรือลบบัญชีผู้ใช้งานโดยการคลิก →Add User หรือกด Account→+ จากนั้นจึงเพิ่มข้อมูลส่วนตัว เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะสามารถจดจำผู้ใช้เครื่องและเตือนผู้ใช้ให้ลบผู้ใช้ที่ถูกต้องบัญชีหนึ่งสามารถรองรับผู้ใช้ได้ 24 คน

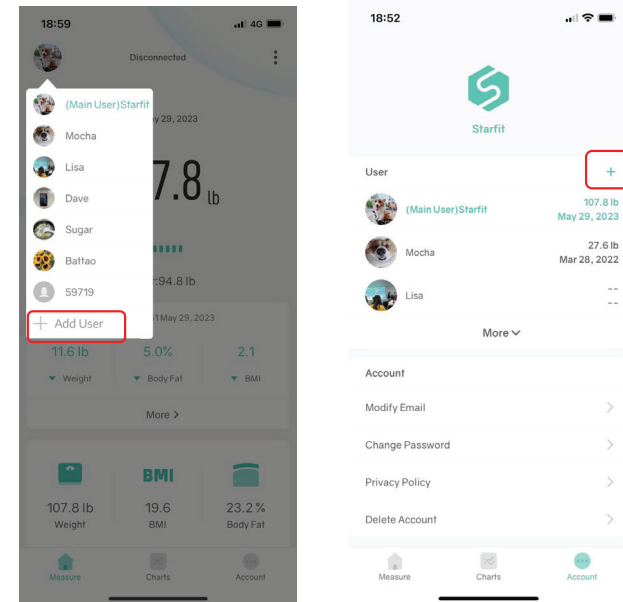

13. การชั่งน้ำหนักเด็กเล็ก: คลิก + →Baby Mode ก้าวขึ้นไปเหยียบด้านบนเครื่องชั่งน้ำหนัก หลังจากนั้นเครื่องจะวิเคราะห์น้ำหนักตัวของคุณและจากนั้นอุปกรณ์จะคำนวณน้ำหนักของเด็ก

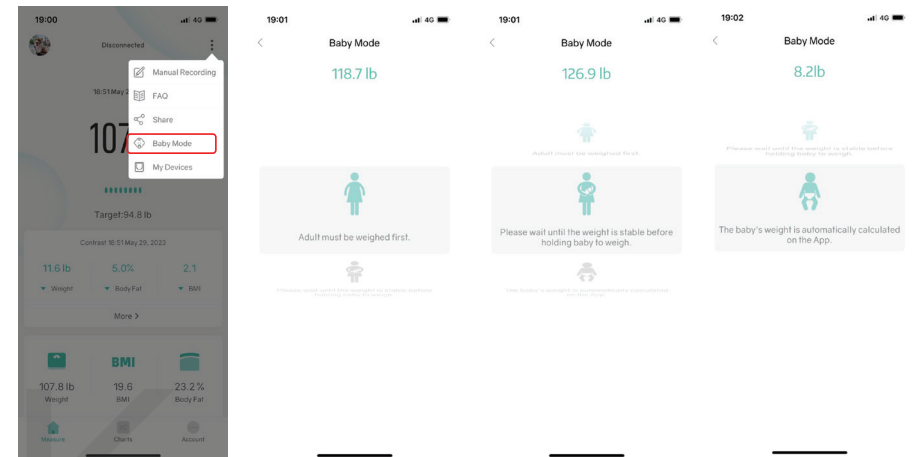


6. ก้าวเท้าลงบนเครื่องชั่งน้ำหนักเพื่อเริ่มต้นการใช้งาน รอจนกว่าหน้าจอแสดงผล “0.00” (กก./ปอนด์/ตัน)
7. เปิดแอปพลิเคชัน Starfit ไว้ที่หน้าจอหลัก
- จากนั้นสัญญาณการเชื่อมต่อบลูทูธจะปรากฏบนหน้าจอ LED
- ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อจะปรากฏบนหน้าจอหลักพร้อมกัน
8. ก้าวขึ้นบนเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยเท้าเปล่า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยืนบนแผ่นโลหะแผ่นด้วยเท้าเปล่าตามภาพด้านล่าง




หมายเหตุ:
หากการยืนบนเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยเท้าเปล่าหรือท่าทางที่ไม่ถูกต้องบนเครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบจะวัดเฉพาะน้ำหนักและดัชนีมวลกายเท่านั้น และแสดงบนหน้าจอหลัก หากต้องการข้อมูลครบถ้วน กรุณาการยืนบนเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยเท้าเปล่าและจับเอาต์ด้วยท่าทางที่ถูกต้อง


9. ตัวเลขที่แสดงผลจะเพิ่มขึ้นเมื่อเครื่องชั่งน้ำหนักทำการชั่งและวิเคราะห์
 - กรุณาสีบนิ่ง ๆ และอยู่ในท่าทางเดิมเป็นเวลา 30 วินาที
 - แอปพลิเคชันจะแสดงตารางการชั่งน้ำหนักพร้อมเสียงเพลง ขณะกำลังทำการวัดไขมันในร่างกาย
 - หลังจากการทำรายการเสร็จสิ้น สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแอปพลิเคชัน
 - ในขณะที่ชั่งตัวคุณ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลหลักทั้ง 6 รายการได้บนหน้าจอ LED
10. สามารถคลิก More เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม
11. สามารถค้นหารายงานการวิเคราะห์เกี่ยวกับน้ำหนักตัว BMI BFR กล้ามเนื้อ มวลกระดูก ฯลฯ ได้ เมื่อคุณคลิก Record ทั้งนี้สามารถดูแผนภูมิการติดตามระยะยาวของคุณได้

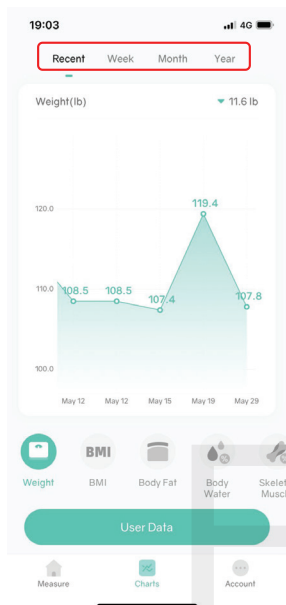

หน้าจอ LED

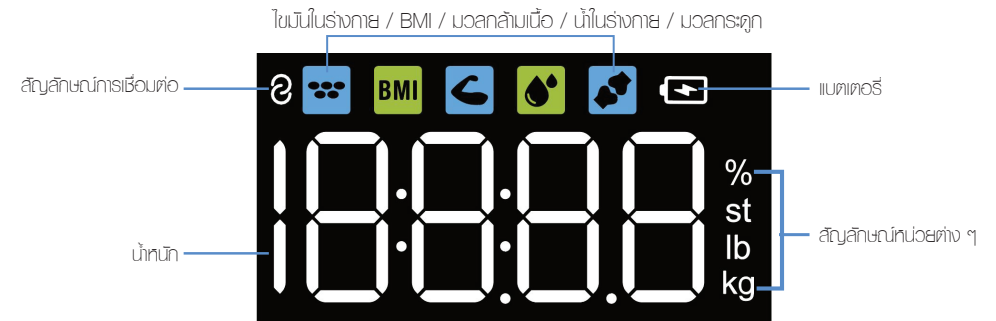

ลำดับการแสดงผลของหน้าจอ LED

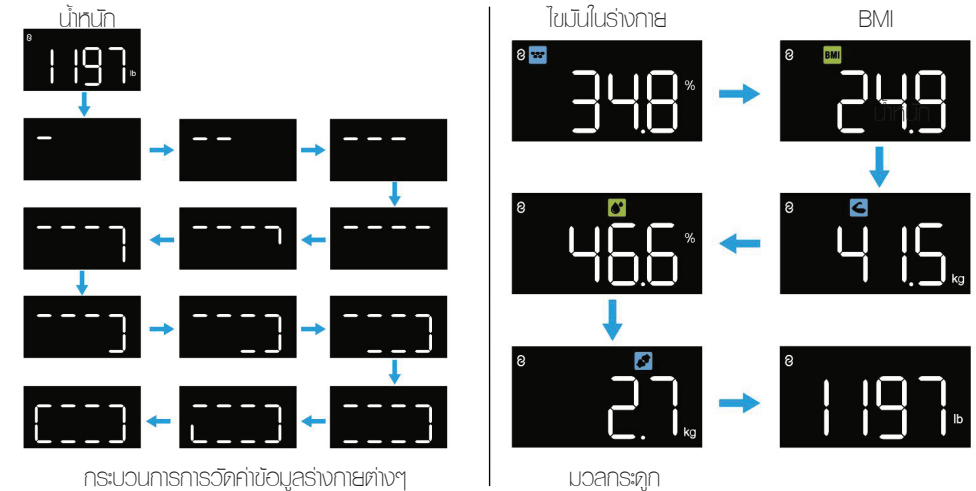


หมายเหตุ: ห้ามก้าวลงจากเครื่องชั่งในขณะที่หน้าจอกำลังทำงาน ซึ่งแสดงว่าเครื่องกำลังทำการชั่งน้ำหนักอยู่ กรุณารอจนกว่าเครื่องจะทำการวัดค่าเสร็จสิ้น จากนั้นหน้าจอจะแสดงผล


ผลการทดสอบด้านบน ได้แก่ อัตราไขมันในร่างกาย BMI กล้ามเนื้อ อัตราน้ำในร่างกาย และกระดูก ซึ่งจะแสดงเป็นเวลา 3 วินาทีต่อข้อมูล

วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Starfit

1. วางเครื่องชั่งน้ำหนักลงบนพื้นผิวที่เรียบและแข็ง
2. ก้าวขึ้นไปบนเครื่องชั่งน้ำหนักเพื่อเปิดการใช้งาน
เปิดลูกรอบบนโทรศัพท์สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ
3. ลงทะเบียนบัญชีของคุณด้วย อีเมลหรือบัญชีโซเชียลมีเดียสำหรับแอปพลิเคชัน Starfit

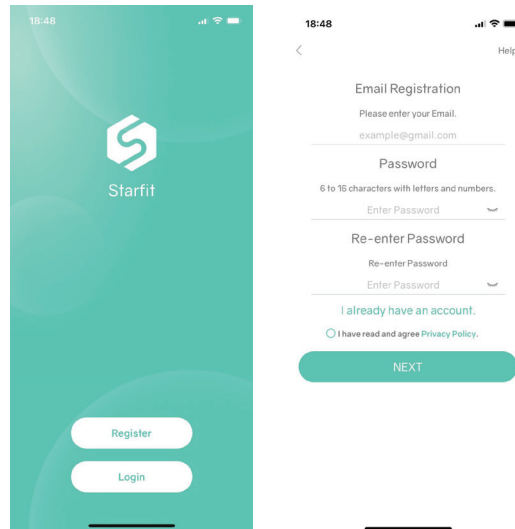

4. เพิ่มข้อมูลส่วนตัวและกดตกลง
หมายเหตุ: การป้อนข้อมูลเพศ อายุ และส่วนสูงไม่ถูกต้องอาจทำให้การคำนวณไม่แม่นยำ

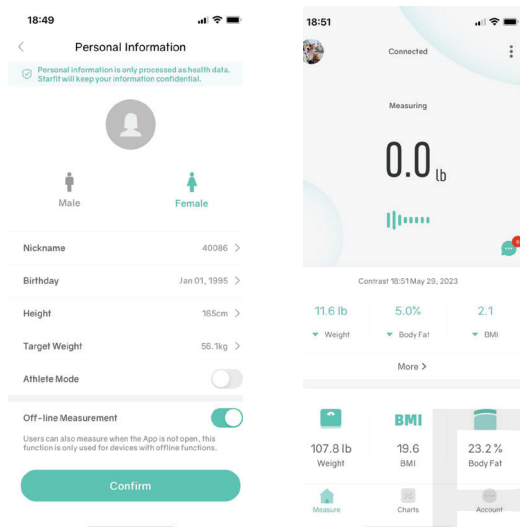

5. จับคู่เครื่องชั่งน้ำหนักผ่านบลูทูธ โดยการกด Account → My Device → + → Searching Bluetooth
เมื่อจับคู่และเมื่อค้นหาเครื่องชั่งน้ำหนัก (เปิดเครื่องชั่งน้ำหนักไว้) จากนั้นโทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเครื่องชั่งน้ำหนักแล้ว

