



เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ:
วัดค่ามวลร่างกาย

รุ่น FI2435WB

FRONT




SMART WEIGHT SCALE : FI2435WB

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานในแอปพลิเคชัน Fitdays
แอปพลิเคชัน Fitdays ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนติดตามการชั่งน้ำหนักหรือวัดค่า ๆ ขององค์ประกอบร่างกายของตนเองได้ทีละคน โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่มผู้ใช้ใหม่

- การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่
1. เปิดแอปพลิเคชัน Fitdays จากนั้นเข้าสู่ส่วน Account
 2. กดที่โปรไฟล์ของคุณที่ด้านบนซ้ายมือของจอ จากนั้นข้อมูลผู้ใช้งานปัจจุบันจะแสดงขึ้นมา
 3. เลือก “Add User”
 4. กรอกข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานใหม่
 - ชื่อเล่น
 - วันเกิด
 - ความสูง
 - น้ำหนักเป้าหมาย
 - เลือกโหมด; เลือกโหมดการชั่งหรือวัดค่าที่เหมาะสม
 5. กด Confirm เพื่อบันทึกผู้ใช้งานใหม่

การเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งาน

1. เปิดแอปพลิเคชัน Fitdays จากนั้นเข้าสู่ส่วน Account
 2. กดที่โปรไฟล์ของคุณที่ด้านบนซ้ายมือของจอ
 3. เลือกผู้ใช้งานที่คุณต้องการจะเปลี่ยน
 4. ข้อมูลของผู้ใช้ที่เลือกจะแสดงในแอปพลิเคชันตอนนี้
- ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละรายจะถูกจัดเก็บแยกกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถติดตามข้อมูลของแต่ละบุคคลได้อย่างแม่นยำ

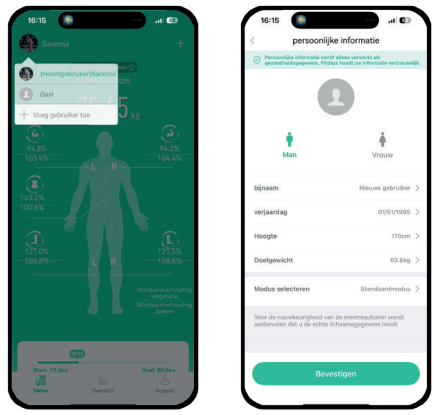

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
เครื่องชั่งน้ำหนักไม่ทำงาน	ผู้ใช้งานไม่ยืนยันบนเครื่องชั่งน้ำหนักอย่างถูกต้อง	ยืนยันให้ท่านบนกับเครื่องชั่ง
	แบตเตอรี่หมด	เปลี่ยนแบตเตอรี่
สัญลักษณ์แบตเตอรี่ หรือ “LO” แสดงบนหน้าจอแสดงผล	แบตเตอรี่ต่ำ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
หน้าจอแสดง “Err”	น้ำหนักมากเกินที่เครื่องชั่งรองรับ	ก้าวออกจากเครื่องชั่งน้ำหนักทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และตรวจสอบน้ำหนักมากสุดที่เครื่องชั่งรับได้
บนแอปพลิเคชัน “Fitdays” ไม่แสดงข้อมูลใด ๆ	การเชื่อมต่อไม่ได้เปิดใช้งานในการตั้งค่าโทรศัพท์	เชื่อมต่อกับโทรศัพท์
	โทรศัพท์อยู่ในโหมด Standby ระหว่างการชั่งน้ำหนัก	เปิดแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ระหว่างการชั่งน้ำหนัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาทันที
บนแอปพลิเคชัน “Fitdays” แสดงแค่ข้อมูลน้ำหนักตัว	ผู้ใช้งานไม่ได้ก้าวขึ้นบนเครื่องชั่งด้วยเท้าเปล่า หรือไม่ยืนบนตำแหน่งอิเล็กทรอนิกส์	ก้าวขึ้นบนเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยเท้าเปล่า และยืนบนตำแหน่งอิเล็กทรอนิกส์
	ผิวเท้าของคุณแห้งเกินไป	ทำให้เท้าของคุณชื้นขึ้นเล็กน้อย

คู่มือคำแนะนำการใช้งานถือเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าและจำเป็นต้องเก็บไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต หากจำเป็นต้องเปลี่ยนเจ้าของอุปกรณ์นี้ จำเป็นต้องนำเอกสารนี้ไปด้วยกัน เพื่อมั่นใจในความปลอดภัยและความถูกต้องของการใช้งานผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดและคำแนะนำที่มีอยู่ในคู่มือในส่วนที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้งาน และคำแนะนำการบำรุงรักษา

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดองค์ประกอบร่างกายคำนวณองค์ประกอบของร่างกาย (เปอร์เซ็นต์ของไขมันในร่างกาย น้ำ กล้ามเนื้อ และดัชนีมวลกาย BMI) และอัตราการเผาผลาญพื้นฐานตามส่วนสูง อายุ และเพศ รองรับการสูง 4.0 และเทคโนโลยีที่สูงกว่า ช่วยให้ท่านส่งข้อมูลไปยังสมาร์ตโฟนโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ท่านติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา


คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ก่อนการใช้งาน จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่มีความเสียหายที่มองเห็นได้ หากท่านมีคำถามใด ๆ ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้และติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย
- เก็บบรรจุภัณฑ์ทุกเวลาตึกให้ห่างจากเด็กเนื่องจากทำให้เกิดอาการหายใจไม่ออก
- อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องใช้เมื่อจุดประสงค์ที่ต้องการทำนั้นและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด การใช้งานอื่นๆ ถือว่าไม่เหมาะสมและเป็นอันตราย
- ผู้ผลิตไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องได้
- อุปกรณ์นี้เด็กที่มีอายุมากกว่า 8 ขวบสามารถใช้งานเครื่องชั่งน้ำหนักได้
- บุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจที่ลดลงหรือบุคคลที่ไม่มีทักษะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะเมื่อได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น เพื่อความปลอดภัย และเฉพาะเมื่อได้รับแจ้งถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเท่านั้น
- เด็กห้ามเล่นกับอุปกรณ์นี้
- การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาห้ามทำโดยเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองดูแล
- ในกรณีที่เกิดความล้มเหลวหรือการทำงานผิดปกติ ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ ติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายของคุณเมื่อติดต่อยกเว้นการซ่อมแซม
- ถูหรือเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยความระมัดระวัง ป้องกันเครื่องชั่งจากการกระแทก ความผันผวนในอุณหภูมิที่ต่างกันมาก ความชื้น ฝุ่น แสงแดดโดยตรงและแหล่งความร้อนอื่น
- ห้ามไม่เจาะตัวเครื่อง เครื่องชั่งน้ำหนักนี้ไม่กันน้ำ ห้ามวางหรือใช้งานเครื่องชั่งน้ำหนักในบริเวณที่น้ำ อัตราความชื้นสูงกว่า 85% หรือการสัมผัสกับน้ำหรือของเหลวอื่นๆ อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนหรือส่งผลต่อการทำงานของเครื่อง
- ห้ามก้าวขึ้นบนเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยเท้าที่เปียก หรือพื้นผิวของเครื่องชั่งที่เปียก เนื่องจากอาจทำให้เกิดการลื่นได้

คำเตือน! ก่อนการใช้งานแอปพลิเคชัน

- ไขมันในร่างกาย น้ำ และเปอร์เซ็นต์ของกล้ามเนื้อโครงสร้างและการเผาผลาญพื้นฐานที่คำนวณโดยมาตราส่วน จะต้องเป็นข้อมูลเบื้องต้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการ
- ห้ามแป้นอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งอยู่บนเครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งน้ำหนักจะส่งกระแสไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นต่ำและอ่อนที่ผ่านร่างกาย
- เครื่องชั่งน้ำหนักนี้ไม่มีควาอันตรายใด ๆ
- เครื่องชั่งน้ำหนักนี้แนะนำให้บุคคลทั่วไปใช้งาน เนื่องจากข้อมูลที่วัดค่าโดยเครื่องชั่งน้ำหนักอาจไม่แม่นยำ
 - o ผู้ที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอื่น ๆ
 - o ผู้ที่มีไข้
 - o เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
 - o ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์
 - o ผู้ที่เข้ารับการผ่าตัด มีอาการบวมที่ขา หรือภาวะกระดูกพรุน
 - o ผู้ที่รับประทานยาโรคหัวใจและหลอดเลือด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

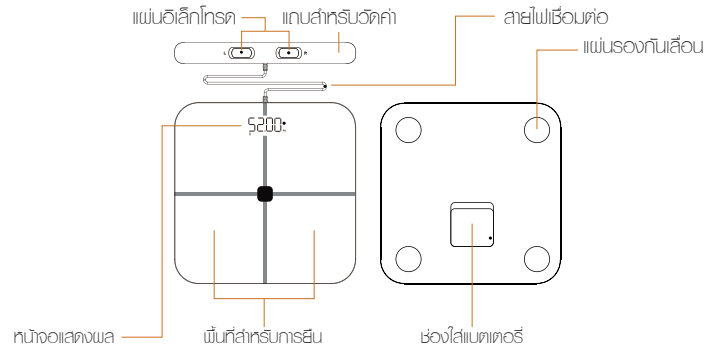

ข้อมูลผลิตภัณฑ์


ความจุ	: 180 กก. / 400 ปอนด์
ความละเอียดในการวัดค่า	: 50 ก. / 0.1 ปอนด์
แบตเตอรี่	: คาร์บอน-สังกะสี AAA 1.5V แบบใช้แล้วทิ้ง 4 ก้อน
จอแสดงผล	: LED
ความถี่ในการทำงาน	: 2402-2480 MHz, กำลังแผ่รังสีที่มีประสิทธิภาพ: <0.9 dBm
สภาพแวดล้อมในการใช้งาน	: +10°C +40°C; RH ≤85%
สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ	: +10°C +50°C; RH ≤85%

วิธีการใช้งาน

- วางเครื่องชั่งน้ำหนักลงบนพื้นผิวที่แห้งและเรียบ จากนั้นหน้าจอ LED จะแสดงผล 0.0 kg ขึ้นมา

จากนั้นคุณสามารถก้าวขึ้นไปเหยียบบนเครื่องชั่งน้ำหนักได้

- ด้านล่างของเครื่องชั่งน้ำหนักมีเซ็นเซอร์น้ำหนัก 4 เซ็นเซอร์ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเท้าของคุณนั้นสัมผัสกับเครื่องชั่งน้ำหนักเสมอ

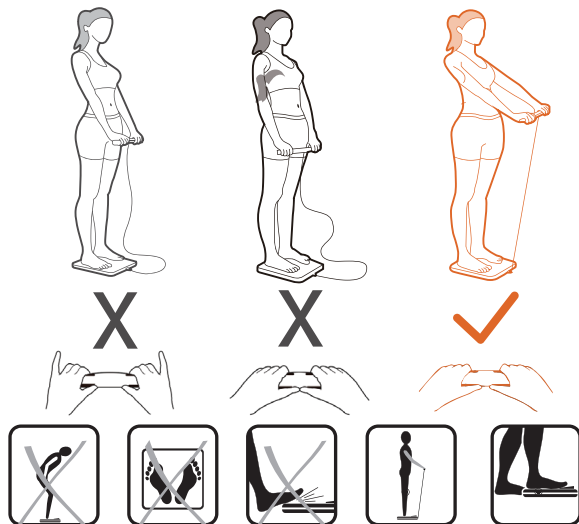

วิธีการติดตั้งแอป FITDAYS

อุปกรณ์ที่รองรับ:

- iOS 8.0 ขึ้นไป

- Android 5.0 ขึ้นไป

1. ค้นหา "Fitdays" ใน App Store หรือ Google Play หรือสแกน QR Code
2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปบนอุปกรณ์ของคุณ
3. ให้อุปกรณ์ปรากฏบนโทรศัพท์ หรือเก็บรหัสของคุณหลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ลงทะเบียนบัญชีของคุณ จากนั้นเพิ่มข้อมูลส่วนตัวและกดตกลง



คำแนะนำการใช้งาน

หากเครื่องชั่งน้ำหนักเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเห็นน้ำหนักได้บนแอปพลิเคชันได้

- หากน้ำหนักไม่แสดงบนแอปพลิเคชัน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ได้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วหรือไม่ โดยการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

- ภายในแอปพลิเคชัน ไปที่ Device จากนั้นจะเห็น "Nikito Smart Scale"

หากไม่พบ ให้กด ADD Device เมื่อเพิ่มอุปกรณ์

- ก้าวขึ้นบนเครื่องชั่งน้ำหนักและกด Scale Search Bluetooth for pairing

หากพบเครื่องชั่งน้ำหนัก จะปรากฏตัวเลือกให้เชื่อมต่อ กด "connect" เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

หากต้องการเพิ่มบัญชีใช้งาน ให้กด Account My Device ในแถบด้านล่างส่วนขวา

จากนั้น กดสัญลักษณ์ + ที่ส่วนบนขวาเพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการบัญชีใช้งาน

เมื่อแอปพลิเคชันตรวจพบอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือใหม่ได้ ให้กดที่สัญลักษณ์เครื่องชั่งเพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น

- เพื่อความแม่นยำในการวัดค่าข้อมูล กรุณาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน เช่น ความสูง วันเกิด เพศ

- สัญลักษณ์ของ Fitdays จะเปลี่ยนเป็น Nikito หลังจากเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ

วิธีการวัดค่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของร่างกาย

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Fitdays
2. เข้าสู่ระบบบัญชีใช้งาน
3. ไปที่หน้าหลักของอุปกรณ์และเลือกอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่
4. กด Measure key
5. ก้าวขึ้นไปบนเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยเท้าเปล่า และยืนบนตำแหน่งพื้นที่กระจายไฟฟ้า จินแถบวัดไว้อย่างถูกต้อง (กรุณาตรวจสอบภาพทางด้านขวาหรือหน้า 1)
6. หลังจากนั้นไม่นาน คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของร่างกายได้ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ของคุณ

การดูแลและซ่อมแซม

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

เมื่อมีสัญลักษณ์ LO หรือแบตเตอรี่แสดงขึ้นมา จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ชนิดเดิม

1. เปิดช่องใส่แบตเตอรี่โดยการดึงฝาช่องใส่แบตเตอรี่ออกมา

2. นำแบตเตอรี่ที่หมดแล้วออกมา

3. ใส่แบตเตอรี่ก้อนใหม่ลงไปให้ถูกต้อง

4. ปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่

การดูแลรักษา

- จัดเก็บอุปกรณ์นี้ในพื้นที่แห้งและเย็น

- จัดเก็บอุปกรณ์นี้ในแนวราบ

- ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าที่นุ่มและแห้ง

- ห้ามใช้สารเคมีหรือสารกัดกร่อนในการทำทำความสะอาด